

Nová, klinicky testovaná speciální metoda omezující projevy stárnutí působí do hloubky pokožky a rychle a významně vyhlazuje vrásky - bez injekcí, pouhým stisknutím tlačítka.

:SQOOM® antiAge



Návod
k obsluze

² Děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili SQOOM. Tato vysoce kvalitní metoda vyvinutá lékařskými a dermatologickými experty společnosti Schick Medical nabízí řadu aktivních gelů a inovativní přístroj pro vysoce účinné výsledky v boji proti projevům stárnutí. Programy pro čištění, masáž, výživu, lifting, bělení a ošetření vrásek nabízí kompletní omlazující péči o pleť. Vše je podloženo vědeckými důkazy a dermatologicky testováno.

SQOOM je inovativní, mikropočítačem řízený přístroj proti projevům stárnutí, který využívá vysoce vyvinuté aktivní gely pro hloubkovou regeneraci pokožky. Celosvětově patentovaná synchronní technologie představuje unikátní kombinaci ionizace s ultrazvukem a aktivní kosmetikou. Vaše pokožka bude brzy mnohem jasnější a mladistvější - podobně jako po intenzivní péči v salónu krásy. Zcela snadné a příjemné ošetření vyhladí vrásky, regeneruje pojivovou tkáň a přispívá k vývoji nových buněk.

Pro maximálně úspěšnou péči si prosím pečlivě prostudujte tento návod.

Souhrnný přehled	4	³
Dejte Vaší pokožce to, co potřebuje	6	
Aplikace	8	
Aplikační programy		
Cleansing / Čištění	10	
Massage / Masáž	12	
Nutrition / Výživa	14	
Lifting	16	
Whitening / Bělení	18	
Wrinkle Care / Ošetření vrásek	20	
Schéma aplikace	22	
Funkční test	24	
SQOOM účinkuje hluboko v pokožce	25	
Údržba a ukládání	26	
Technická specifikace	27	



Vysoce ceněný SQOOM koncept



Souhrnný přehled

4 **Přečtěte si, prosím, tento souhrnný přehled. Tak se nejlépe seznámíte s Vaším přístrojem SQOOM.**

Váš přístroj SQOOM používejte pouze s námi vyvinutými gely. V případě používání kosmetických nebo léčivých přípravků jiných výrobců nepřebíráme žádné záruky.

5

Hlavice z titanové slitiny

Aplikujte dostatečné množství aktivního gelu.

Kontrolka činnosti

Tato kontrolka umístěná na zadní straně přístroje SQOOM svým pravidelným blikáním signalizuje, že přístroj je v činnosti (pouze když je přístroj v kontaktu s pokožkou).

Tlačítko zapnutí/vypnutí (ON/OFF)

Stiskněte toto tlačítko pro aktivaci resp. deaktivaci přístroje SQOOM.

Tlačítko programů (STEP)

Stisknutím tohoto tlačítka můžete aktivovat jeden ze šesti programů.

Volba režimu (MODE)

Tímto tlačítkem zvolte, zda chcete provést ošetření v ultrazvukovém nebo ionizačním v režimu synchronní technologie.

Zelená LED kontrolka: ionizační režim

Červená LED kontrolka: ultrazvukový režim

Kontaktní plochy rukojeti (pravá a levá)

Při používání vždy držte Váš přístroj SQOOM tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch na obou stranách.

Intenzita LOW/HIGH

Stisknutím tohoto tlačítka LOW/HIGH aktivujete nízkou či vysokou intenzitu. LED kontrolka ukazuje rozsah zvolené intenzity.

Kontrolka baterie

Přístroj SQOOM nabíjejte tak dlouho, dokud tato kontrolka nesvítí zeleně.

Nabíjecí stanice

Po každém použití vložte přístroj SQOOM zpět do nabíjecí stanice. Tímto způsobem zajistíte, že Váš přístroj SQOOM bude vždy připraven k činnosti.



Dejte Vaší pokožce to, co potřebuje.

6 Výjimečný úspěch SQOOM je založen na perfektní interakci metody a aktivních látek. Zatímco přístroj SQOOM odpovídá za transport účinných látek do odpovídajících vrstev pokožky, gely SQOOM obsahují ty správné účinné látky. Stejně jako dobře vyvážený sportovní tým poskytují pokožce vše potřebné pro to, aby vypadala svěže, mladě a zářivě. A nezabere Vám to ani příliš mnoho času. Maximálně 8 minut z Vašeho cenného času denně s přístrojem SQOOM Vám poskytne viditelné výsledky - a to už za dva týdny!



xcentialSkinCare

AntiAge péče pro suchou, normální nebo mastnou pleť. Určená k aplikaci po SQOOM ošetření.



SQOOM cleanser

Jakmile je pokožka vyčištěna až do hloubky pórů a veškerý keratin, kožní maz a ostatní zbytky vznikající jako důsledek odumírání pokožky jsou odstraněny, účinné substance obsažené v přípravku SQOOM xcential hyaGel mohou proniknout až do spodních vrstev pokožky. Přípravek SQOOM cleanser dezinfikuje pokožku a má jemný chladivý efekt. Gel s aloe vera zvlhčuje pokožku, zatímco panthenol a výtažek z heřmánku poskytují zklidňující účinek. Ovlivňují bakteriální flóru a starají se o příznivé podmínky pro mikroorganismy přátelské k pokožce.

SQOOM xcential hyaGel

Inovativní gel působící proti projevům stárnutí, vyrobený z látek blahodárně působících na pokožku a přírodních látek. Hlavní složkou je rozštěpená kyselina hyaluronová - rozštěpená v důsledku toho, že běžné částice kyseliny hyaluronové jsou dosti velké a neforemné a uvolňují svůj zpevňující efekt pouze na krátkou dobu a pouze ve vrchních vrstvách pokožky. Speciální látky dělí částice kyseliny hyaluronové obsažené v přípravku SQOOM xcential hyaGel na výrazně menší kousky, dříve než jsou přidány do SQOOM xcential hyaGel. Tím je umožněn mnohem snadnější průnik většího množství částic do kritických vrstev pokožky. Tyto částice zde pak vyplní dutiny způsobené stárnutím pokožky.

SQOOM DeSpot

Pro hloubkové čištění pigmentových a stařeckých skvrn. Přípravek SQOOM DeSpot je vysoce účinný. Účinkuje přesně tam, kde má: v pigmentové skvrně - nikoliv kolem ní. Speciální gel DeSpot obsahuje absolutně novou kombinaci sulforaphanu a genisteinu, sloučeniny podobné estrogeneru. Součástí gelu je také nízkomolekulární bio hyaluronová kyselina a šťáva z listů aloe pro intenzivní zvlhčování pokožky.

8 Před každým ošetřujícím programem vyčistěte Vaši pokožku obvyklým způsobem. Následně - v závislosti na zvoleném programu ošetření - aplikujte dostatečné množství jednoho z aktivních gelů přímo na hlavici přístroje nebo na plochu pokožky, kterou chcete ošetřit.

Nyní zvolte příslušný ošetřující program a uchopte přístroj SQOOM pevně z obou stran tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch. Následně přiložte hlavici přístroje na plochu pokožky, kterou chcete ošetřit a pohybujte jemně hlavicí po pokožce.

Uvědomte si prosím: Pokud používáte přístroj SQOOM k ošetření pokožky jiné osoby, musíte se této osoby dotýkat svou volnou rukou (kontakt pokožka-pokožka) tak, aby došlo k uzavření okruhu a aby byla zajištěna správná funkce Vašeho přístroje SQOOM.



¹⁰ CLEANSING program 1 (čištění)

Hlubkové čištění pokožky

Program: C

Gel: cleanser


Doba ošetření: 4 minuty



V kombinaci s přípravkem cleanser tento program zajišťuje naprosto vyčištěnou pokožku. Funkce synchronní technologie zvyšuje pozitivní účinky.

Keratin, kožní maz a ostatní produkty degradace pokožky jsou jednoduše rozpuštěny a po ošetření odstraněny otřením vlhkou tkaninou nebo omytím vodou.

Nejprve naneste cleanser v dostatečném množství na hlavici přístroje nebo na oblast pokožky, kterou chcete ošetřit. Uchopte přístroj SQOOM pevně z obou stran tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch. Nyní položte hlavici přístroje na oblast pokožky, kterou chcete ošetřovat a pohybujte přístrojem jemně v pomalých kruzích.

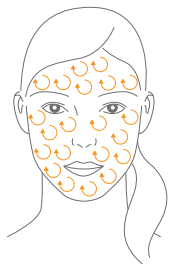

¹¹ 1. Proveďte vyčištění pokožky běžným způsobem (odstraňte make-up, krémy a parfémy) a zapněte přístroj SQOOM stisknutím tlačítka **POWER**.

2. Stiskněte tlačítka **STEP** tolikrát, dokud se nerozsvítí kontrolka **C** (CLEANSING).

3. Následně stiskněte tlačítka **MODE** pro volbu funkčního režimu **ION** a **ULTRA** tolikrát, dokud se nerozsvítí obě kontrolky.

4. Stiskněte tlačítka **L/H** pro volbu intenzity **HIGH**.

Jakmile vzhled Vašeho přístroje SQOOM odpovídá vedlejšímu obrázku, zařízení je připraveno k provozu a Vy můžete začít s ošetřováním.

Základní doba provozu činí 4 minuty. Ošetření můžete opakovat po zaznění akustického signálu, a to opakovaným stisknutím tlačítka **STEP**.

Po ukončení SQOOM ošetření (hlubkové čištění) si otřete obličej zvlhčenou tkaninou nebo jej omyjte vodou. Nyní můžete zahájit aplikaci přípravku xCential hyaGel.

12 **MASSAGE program 2**


Masáž

Program: M
Gel: xcential hyaGel
Doba ošetření: 8 minut



Podobně jako v případě běžné masáže, SQOOM masáž navrácí Vaší pokožce uvolnění a pružnost. Negativní a pozitivní ionty a zvukové vlny aktivují buněčné prostory a efektivně stimulují metabolismus. Vaše pokožka bude znatelně krásnější a mladistvější.

Nejprve aplikujte dostatečné množství přípravku xcential hyaGel na hlavici přístroje nebo na plochu pokožky, kterou chcete ošetřit. Uchopte přístroj SQOOM pevně z obou stran tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch. Nyní položte hlavici přístroje na oblast pokožky, kterou chcete ošetřovat a pohybujte přístrojem jemně dle obrázku.

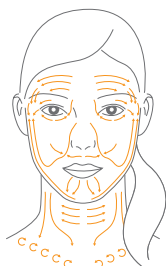

Doporučujeme provést program CLEANSING před každým ošetřením.

1. Zapněte přístroj SQOOM stisknutím tlačítka **POWER**.

2. Stiskněte tlačítko **STEP** tolikrát, dokud se nerozsvítí kontrolka **M** (MASSAGE).

3. Následně stiskněte tlačítko **MODE** pro volbu funkčního režimu **ION** a **ULTRA** tolikrát, dokud se nerozsvítí obě kontrolky.

4. Stiskněte tlačítko **L/H** pro volbu intenzity **HIGH** a **LOW**.

Jakmile vzhled Vašeho přístroje SQOOM odpovídá vedlejšímu obrázku, zařízení je připraveno k provozu a Vy můžete začít s ošetřováním.

Základní doba provozu činí 4 minuty. Ošetření můžete opakovat po zaznění akustického signálu, a to opakovaným stisknutím tlačítka **STEP**.

Po dokončení ošetření pomocí přípravku SQOOM xcential hyaGel máte k dispozici dvě možnosti: Omyjte přípravek xcential hyaGel pomocí vlhké tkaniny nebo jej použijte jako pleťovou masku a ponechte jeho účinné složky pozitivně působit na pokožku. Můžete rovněž ponechat tuto pleťovou masku působit přes noc - výsledkem bude jemná dětská pokožka. Před aplikací Vašeho pleťového krému masku xcential hyaGel pečlivě a dokonale omyjte.

14 NUTRITION program 3

Výživa

Program: N
Gel: xcential hyaGel
Doba ošetření: 8 minut




Vaše pokožka potřebuje výživu. Unikátní funkce synchronní technologie silně aktivuje buněčné prostory a tímto způsobem garantuje vysoce účinnou aplikaci vyživujících látek v kombinaci s extrémně efektivním přípravkem xcential hyaGel.

Poznámka:

V případě vysoce citlivé pokožky Vám místo programu N (NUTRITION) doporučujeme použití programu W (Wrinkle Care).

Nejprve aplikujte dostatečné množství přípravku xcential hyaGel na hlavici přístroje nebo na plochu pokožky, kterou chcete ošetřit. Uchopte přístroj SQOOM pevně z obou stran tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch. Nyní položte hlavici přístroje na oblast pokožky, kterou chcete ošetřovat a pohybujte přístrojem jemně dle obrázku.

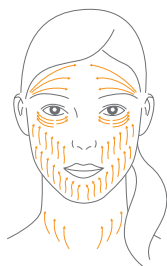

Před každým ošetřením doporučujeme provádět program CLEANSING.

1. Zapněte přístroj SQOOM stisknutím tlačítka **POWER**.

2. Stiskněte tlačítko **STEP** tolikrát, dokud se nerozsvítí kontrolka **N** (NUTRITION).

3. Následně stiskněte tlačítko **MODE** pro volbu funkčního režimu **ION** a **ULTRA** tolikrát, dokud se nerozsvítí obě kontrolky.

4. Stiskněte tlačítko **L/H** pro volbu intenzity **HIGH** a **LOW**.

Jakmile vzhled Vašeho přístroje SQOOM odpovídá vedlejšímu obrázku, zařízení je připraveno k provozu a Vy můžete začít s ošetřováním.

Základní doba provozu činí 4 minuty. Ošetření můžete opakovat po zaznění akustického signálu, a to opakovaným stisknutím tlačítka **STEP**.

Po dokončení ošetření pomocí přípravku SQOOM xcential hyaGel máte k dispozici dvě možnosti: Omyjte přípravek xcential hyaGel pomocí vlhké tkaniny nebo jej použijte jako pleťovou masku a ponechte jeho účinné složky pozitivně působit na pokožku. Můžete rovněž ponechat tuto pleťovou masku působit přes noc - výsledkem bude jemná dětská pokožka. Před aplikací Vašeho pleťového krému masku xcential hyaGel pečlivě a dokonale omyjte.

16 LIFTING program 4


Redukce vrásek, zpevnění pokožky

Program: L
Gel: xcential hyaGel
Doba ošetření: 8 minut



Pravidelná a pečlivá aplikace tohoto programu vede rychle ke znatelnému zpevnění pokožky a jejímu omlazení. Vrásky - a zejména hluboké vrásky - budou významně redukovány. Vaše pokožka bude opět měkká a pružná. Funkce synchronní technologie aktivuje produkci tělu vlastního elastinu a kolagenu.

Nejprve aplikujte dostatečné množství přípravku xcential hyaGel na hlavici přístroje nebo na plochu pokožky, kterou chcete ošetřit. Uchopte přístroj SQOOM pevně z obou stran tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch. Následně přiložte hlavici přístroje na plochu pokožky, kterou chcete ošetřit a pohybujte přístrojem jemně dle obrázku.

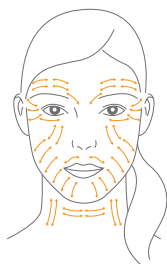

Před každým ošetřením doporučujeme provádět program CLEANSING.

1. Zapněte přístroj SQOOM stisknutím tlačítka **POWER**.

2. Stiskněte tlačítko **STEP** tolikrát, dokud se nezsvítí kontrolka **L (LIFTING)**.

3. Následně stiskněte tlačítko **MODE** pro volbu funkčního režimu **ION** a **ULTRA** tolikrát, dokud se nezsvítí obě kontrolky.

4. Stiskněte tlačítko **L/H** pro volbu intenzity **HIGH** a **LOW**.

Jakmile vzhled Vašeho přístroje SQOOM odpovídá vedlejšímu obrázku, zařízení je připraveno k provozu a Vy můžete začít s ošetřováním.

Základní doba provozu činí 4 minuty. Ošetření můžete opakovat po zaznění akustického signálu, a to opakovaným stisknutím tlačítka **STEP**.

Po dokončení ošetření pomocí přípravku SQOOM xcential hyaGel máte k dispozici dvě možnosti: Omyjte přípravek xcential hyaGel pomocí vlhké tkaniny nebo jej použijte jako pleťovou masku a ponechte jeho účinné složky pozitivně působit na pokožku. Můžete rovněž ponechat tuto pleťovou masku působit přes noc - výsledkem bude jemná dětská pokožka. Před aplikací Vašeho pleťového krému masku xcential hyaGel pečlivě a dokonale omyjte.

Uživatelské programy

18 WHITENING program 5

Redukce pigmentových a stařeckých skvrn

Program: W


Gel: DeSpot

Doba ošetření: 8 minut



Pro redukci pigmentových a stařeckých skvrn použijte účinný gel DeSpot.

Nejprve aplikujte dostatečné množství přípravku DeSpot na hlavici přístroje nebo na plochu pokožky, kterou chcete ošetřit. Uchopte přístroj SQOOM pevně z obou stran tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch. Následně přiložte hlavici přístroje na plochu pokožky, kterou chcete ošetřit a pohybujte přístrojem jemně v pomalých kruzích.

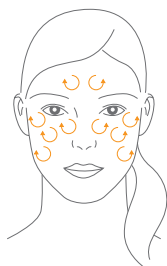

19

1. Zapněte přístroj SQOOM stisknutím tlačítka **POWER**.

2. Stiskněte tlačítko **STEP** tolikrát, dokud se nerozsvítí kontrolka **W** (WHITENING).

3. Následně stiskněte tlačítko **MODE** pro volbu funkčního režimu **ION** a **ULTRA** tolikrát, dokud se nerozsvítí obě kontrolky.

4. Stiskněte tlačítko **L/H** pro volbu intenzity **HIGH** a **LOW**.



Jakmile vzhled Vašeho přístroje SQOOM odpovídá vedlejšímu obrázku, zařízení je připraveno k provozu a Vy můžete začít s ošetřováním.

Základní doba provozu činí 4 minuty. Ošetření můžete opakovat po zaznění akustického signálu, a to opakovaným stisknutím tlačítka **STEP**.

Po dokončení ošetření pomocí přípravku SQOOM DeSpot omyjte přípravek pomocí vlhké tkaniny a aplikujte Váš pleťový krém.

20 WRINKLE CARE program 6

Jemný program pro citlivou pokožku

Program: W
Gel: xcential hyaGel
Doba ošetření: 4 minuty




WRINKLE CARE program je speciálně vyvinutý aplikační program určený pro jemnou a extrémně citlivou pokožku obličeje. Jemná masáž v kombinaci s přípravkem xcential hyaGel zpevňuje tkáň pokožky a redukuje vrásky s maximální možnou citlivostí.

Poznámka:

V případě extrémně citlivé pokožky Vám vždy doporučujeme používat program WRINKLE CARE během několika prvních týdnů.

Nejprve aplikujte dostatečné množství přípravku xcential hyaGel na hlavici přístroje nebo na plochu pokožky, kterou chcete ošetřit. Uchopte přístroj SQOOM pevně z obou stran tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch. Následně přiložte hlavici přístroje na plochu pokožky, kterou chcete ošetřit a pohybujte přístrojem jemně v pomalých kruzích.

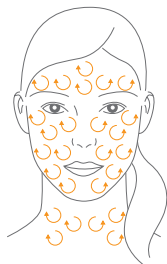

Doporučujeme provést program CLEANSING před každým ošetřením.

1. Zapněte přístroj SQOOM stisknutím tlačítka **POWER**.
2. Stiskněte tlačítko **STEP** tolikrát, dokud se nezsvítí kontrolka **W** (WRINKLE CARE).
3. Následně stiskněte tlačítko **MODE** pro volbu funkčního režimu **ION** a **ULTRA** tolikrát, dokud se nezsvítí obě kontrolky.
4. Stiskněte tlačítko **L/H** pro volbu intenzity **HIGH** a **LOW**.

Jakmile vzhled Vašeho přístroje SQOOM odpovídá vedlejšímu obrázku, zařízení je připraveno k provozu a Vy můžete začít s ošetřováním.

Základní doba provozu činí 4 minuty. Ošetření můžete opakovat po zaznění akustického signálu, a to opakovaným stisknutím tlačítka **STEP**.

Po dokončení ošetření pomocí přípravku SQOOM xcential hyaGel máte k dispozici dvě možnosti: Omyjte přípravek xcential hyaGel pomocí vlhké tkaniny nebo jej použijte jako pleťovou masku a ponechte jeho účinné složky pozitivně působit na pokožku. Můžete rovněž ponechat tuto pleťovou masku působit přes noc - výsledkem bude jemná dětská pokožka. Před aplikací Vašeho pleťového krému masku xcential hyaGel pečlivě a dokonale omyjte.

Pro maximální úspěšnost Vám doporučujeme dodržovat šestiměsíční kúru. Tato kúra poskytuje Vaší pokožce dostatečné množství času na regeneraci a doplnění potřebné vlhkosti.


	SQOOM program	Účinek	Interval ošetření
<p>1.-6. týden Tělu vlastní kyselina hyaluronová je zásobníkem vlhkosti v pokožce. Stabilizuje elastin a kolagenová vlákna a chrání buňky před působením volných radikálů. Produkce kyseliny hyaluronové klesá po 25. roku věku, což vede ke snížení elasticity a schopnosti kůže vázat vlhkost. Následkem toho dochází ke vzniku vrásek. Během prvních šesti týdnů doporučujeme každodenní ošetření s cílem bojovat proti dalšímu úbytku kyseliny hyaluronové a pomalu obnovit její zásobu v pokožce.</p>	<p>1.-3. týden P1-Čištění 4 minuty P2-Masáž 8 minut</p> <p>4.-6. týden P1-Čištění 4 minuty P2-Masáž 4 minuty P3-Výživa 4 minuty</p> <p>V případě extrémně citlivé pokožky kolem očí použijte v prvních týdnech ošetření program Wrinkle Care.</p>	<p>Ihned po prvním ošetření selepší prokrvení vaší pleti, pleť je jasnější a růžovější. Během prvních tří týdnů se mohou objevit pupínky jako důsledek čištění. Pleť je dokonale vyčištěná.</p>	<p>Používejte SQOOM denně.</p>
<p>7.-12. týden Pokud jste ve věku kolem 30ti let, zásoba hyaluronové kyseliny byla pravidelnou aplikací během prvních šesti týdnů doplněna a můžete přejít na schéma aplikace určené pro 13.-24. týden. Pokud je Vám více jak 40 let, je třeba pokračovat v doplňování zásoby kyseliny hyaluronové, protože Vaše pokožka obsahuje pouze 60 % původního obsahu této kyseliny. V tomto období doporučujeme ošetření každý druhý den.</p>	<p>7.-12. týden P1-Čištění 4 minuty P3-Výživa 4 minuty P4-Lifting 4 minuty</p>	<p>Hrubé póry se zmenšují a pleť je výrazně čistá. Drobné vrásky mizí a ty hlubší jsou redukovány.</p>	<p>Každý druhý den se SQOOM stává součástí Vaší pravidelné péče o pleť. Ve dnech, kdy nevyužíváte SQOOM v rámci ošetření Vaší pleti, můžete rozšířit jeho použití i na jiné oblasti, např. na oblast krku či rukou.</p>
<p>13.-24. týden Zásoba kyseliny hyaluronové byla doplněna a Vy můžete snížit frekvenci ošetření na dvě aplikace týdně v zájmu zachování její úspěšnosti. Můžete také rozšířit ošetření na jiné oblasti, či se soustředit na oblast hlubších vrásek.</p>	<p>13.-24. týden P1-Čištění 4 minuty P3-Výživa 4 minuty P4-Lifting 8 minut</p>	<p>Vrásky mizí a mimické vrásky jsou minimalizovány. Vaše pleť je jasnější a svěží. Vypadáte mladistvěji.</p>	<p>SQOOM se stal součástí vaší pravidelné péče o pleť. Dostačující je aplikace 2x týdně. Z tohoto důvodu můžete rozšířit aplikaci nejen na krk a ruce, ale také na dekolť a oblasti postižené celulitidou.</p>

Ultrazvukové vlny jsou lidským okem nepostřehnutelné. SQOOM uvolňuje hluboké mikrovibrace tak rychle, že nejsou nejen vidět ale ani cítit na Vaší pleti. Ale nemusíte se obávat, že by SQOOM nefungoval.



Abyste viděli vibrace vody, postupujte podle následujících kroků:

1. Stiskněte tlačítko Power.
2. Stiskněte tlačítko MODE pro volbu režimu ULTRA.
3. Stisknutím tlačítka STEP zvolte jakýkoliv program.
4. Na hlavici přístroje naneste kapku vody.
5. Uchopte přístroj pevně z obou stran tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch.
6. Dotkněte se hlavice přístroje jedním prstem volné ruky.
7. Na hlavici přístroje uvidíte malé tančící bublinky.

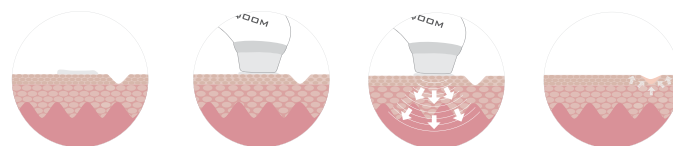

SQOOM transportuje účinné látky hluboko do pokožky pomocí transportního systému, který generuje milión jemných vibrací za sekundu. Inovativní bio-molekulární přípravky vytvořené z tepelných, mechanických a fyzikálně chemických složek v kombinaci s mikroprocesorem řízeným přístrojem SQOOM poskytují vysoce komplexní a efektivní výsledky.

Přístroj SQOOM provádí masáž pokožky (epidermis) a škůry (dermis).

Tímto způsobem je pokožce dodáváno větší množství vyživujících látek a kyslíku – dochází rovněž ke zlepšení oběhu krve v cévách, modelování postavy. Zároveň je stimulován lymfatický systém a je aktivně podporován rozvoj syntézy kolagenu. Je aktivována regenerace buněk. Spuštění bio-molekul regeneruje pokožku, která tak získává vyšší pružnost a je zahájen proces omlazování.

SQOOM významnou měrou zvyšuje vlastní produkci kolagenu a elastinu. Pro možnost pronikání účinných látek obsažených v gelu SQOOM do pojivových tkání ve středních a hlubokých vrstvách pokožky je zapotřebí dodatečný katalyzátor – patentovaný systém synchronní technologie. Ten nabízí jedinečnou kombinaci ionizace (iontoforézy) a ultrazvuku (sonoforézy). Jinak řečeno ultrazvuk je dveřním zvonkem, zatímco ionizace následně otevírá nespočetné množství malých dveří. A to vše probíhá milionkrát za sekundu.

Pokožka je zpevňována. Vrásky jsou redukovány a díky této unikátní metodě se textura pokožky stává pevnější a hladší – a to v krátké době.

26 Pro dosažení dlouhé životnosti Vašeho přístroje laskavě respektujte následující instrukce:

- Přístroj ukládejte na suchém místě a neomývejte jej vodou.
- K čištění hlavičky přístroje použijte vlhkou tkaninu.
- Po vypnutí přístroj vložte do nabíjecí stanice a ujistěte se, že LED kontrolka svítí červeně.
- Jakmile je proces nabíjení ukončen, červené světlo LED kontrolky se změní na zelené. V případě poruchy nabíjení začne červená LED kontrolka blikat.
- Pokud je baterie přístroje zcela vybitá, nabíjejte ji před dalším používáním přístroje po dobu minimálně tří hodin.
- Při úplném nabití baterie vydrží přístroj v provozu po dobu přibližně čtyř hodin.
- Pro zobrazení stavu nabití baterie stiskněte tlačítko STEP a podržte jej stisknuté přibližně tři sekundy. Pokud se rozsvítí všech šest LED diod programů, baterie přístroje je plně nabitá. Pokud se rozsvítí pouze dvě LED diody, zbývající kapacita baterie postačuje přibližně na 30 minut provozu. Zaznění signálního tónu upozorňuje na nutnost dobit baterii.
- Po dvou minutách nečinnosti bude přístroj automaticky vypnut.
- Přednastavená doba aplikace pro každý krok je čtyři minuty. Po uplynutí čtyř minut zazní zvukový signál a přístroj přejde do pohotovostního (standby) režimu. Přístroj se automaticky úplně vypne, pokud nebude během následujících dvou minut reaktivován.
- Nominální vstupní napětí je 100-240 V AC - to znamená, že Váš přístroj můžete používat na cestách kdekoli na světě.
- Jakmile je přístroj kompletně dobit, odpojte nabíjecí stanici od sítě.
- Elektrické kontakty udržujte vždy v čistotě, bez prachu a suché.

Název zařízení	
Zařízení	SQOOM M1 (B-0204A)
Nabíjecí stanice	
Síťové napětí	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Hmotnost	133 g
Vlastní přístroj	
Li-Ion baterie	
Síťové napětí	AC 100-240 V, 50/240 V
Výstup/adaptér	4.2 V = 1 A
Výkon	7 W
Hmotnost	194 g (brutto)
Ultrazvuk	
Frekvence	1 MHz
Úroveň intenzity	od 0,1 W/cm ² do 0,5 W/cm ²
Ionizace	rozsah impulzů 1 Hz/150 µsec

Z důvodů recyklace nesmí být přístroj po ukončení jeho životnosti likvidován jako běžný komunální odpad. Likvidaci přístroje můžete provést jeho vrácením Vašemu prodejci nebo do příslušného sběrného místa.

27

Důležité poznámky

Váš přístroj SQOOM používejte pouze s námi vyvinutými gely.

Ošetřování jedné oblasti pokožky neprovádějte déle než 20 minut denně.

Přístroj SQOOM nepoužívejte v oblastech pokožky zasažených rakovinou kůže ani v oblastech, které byly předmětem chirurgických zákroků.

Přístroj SQOOM nepoužívejte v případě, že máte implantován kardiostimulátor.

V případě zvýšené funkce štítné žlázy nepoužívejte přístroj SQOOM na přední straně krku nebo hrudníku.

Přístroj SQOOM nepoužívejte v blízkosti kloubových implantátů - mohlo by to způsobit bolest.

V průběhu těhotenství nepoužívejte přístroj SQOOM v břišní nebo hrudní oblasti.

Zabraňte kontaktu s očima.

Přístroj a gely uložte mimo dosah dětí.

Gely neskladujte při teplotách vyšších než 25 °C.

Gely jsou určeny výhradně pro aplikaci na pokožku.

Pokud používáte přístroj SQOOM k ošetření pokožky jiné osoby, musíte se této osoby dotýkat svou volnou rukou (kontakt pokožka-pokožka) tak, aby byla zajištěna správná funkce systému.

© All rights reserved by the Schick Medical GmbH. Veškeré údaje obsažené v tomto Návodu jsou chráněny autorským právem.

Schick Medical GmbH, D-78628 Rottweil

CE, ISO 9001 2000, UL-C, US, UFD, HS Mark

Výhradní dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku:

MedPharm Consulting s.r.o.
Havelská 14
CZ – 110 00 Praha 1

Tel.: +420 737 524 928
Fax: +420 222 094 333
sqoom@medpharm.cz
www.sqoomcz.cz

:SQOOM[®] antiAge

Péče, s kterou omládnete

105.201405.CZ

Registrovaná ochranná značka
společnosti Schick Medical GmbH
Germany

Výhradní dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku:

MedPharm Consulting s.r.o.
Havelská 14
CZ – 110 00 Praha 1

Tel.: +420 737 524 928
Fax: +420 222 094 333
sqoom@medpharm.cz
www.sqoomcz.cz