



SQOOM®

Инструкция по
использованию





Краткий обзор	4
Применение	6
xCential Gele	8
Программы применения	10
xCential blue Gele	16
Программы применения	18
Эксплуатация и хранение	24
Технические характеристики и важные примечания	26

Благодарим Вас за покупку SQOOM. Эта высококачественная концепция от эксперта в области медицины и косметологии - компании SCHICK Medical – предлагает ряд активных гелей и инновационный прибор, обеспечивающий высокоэффективный результат в борьбе против старения. Предлагаются разные программы: Очистка, Массаж, Питание, Лифтинг, Отбеливание, Разглаживание морщин и Растяжения спины и мышц.

Пожалуй, самый элегантный способ получить красивую кожу. SQOOM Концепция с запатентованной синхронной технологией сочетает ультразвук и ионофорез.

Просим Вас внимательно прочитать эту инструкцию по использованию для достижения наилучшего результата в уходе за кожей.



1 | Трансдуцер с титановым сплавом
особенно подходит для людей,
страдающих аллергией

На трансдуксер наносится гель.

2 | Световой индикатор

Световой индикатор на обратной стороне SQOOM регулярно загорается, чтобы показать, что прибор работает (только при контакте с кожей).

3 | Кнопка ON/OFF (включение/выключение)

Нажмите на кнопку один раз для включения и/или выключения SQOOM.

4 | Кнопка выбора программы STEP

Нажатие на кнопку выбора позволит Вам активировать одну из программ.

5 | Контактные рукоятки справа и слева

Всегда держите свой SQOOM, касаясь контактных рукояток с двух сторон.

6 | Зарядное устройство

Ставьте SQOOM в зарядное устройство после каждого использования. Таким образом Вы можете быть уверены, что SQOOM всегда будет готов к работе.

7 | Световой индикатор зарядки батареи

Заряжайте SQOOM до тех пор, пока световой индикатор не станет зеленым.

Просим Вас использовать SQOOM только с разработанными нами гелями по уходу за кожей. Мы не несем ответственности за результаты при использовании косметических или медицинских препаратов других производителей.




Очистите свою кожу, как обычно, перед началом любой программы.

Затем щедро нанесите один из ценных гелей прямо на трансдьюсер (1) или на обрабатываемый участок кожи. Включите прибор (2).

Теперь выберите подходящую программу воздействия (3) и крепко держите прибор SQQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток (4). Затем приложите трансдьюсер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им по коже медленными круговыми движениями (5).

Пожалуйста, обратите внимание: Если Вы проводите процедуры с использованием прибора SQQOOM на коже другого человека, то обязательно касайтесь этого человека свободной рукой (контакт с кожей), чтобы замкнуть круг и обеспечить правильное использование Вашего прибора (6).

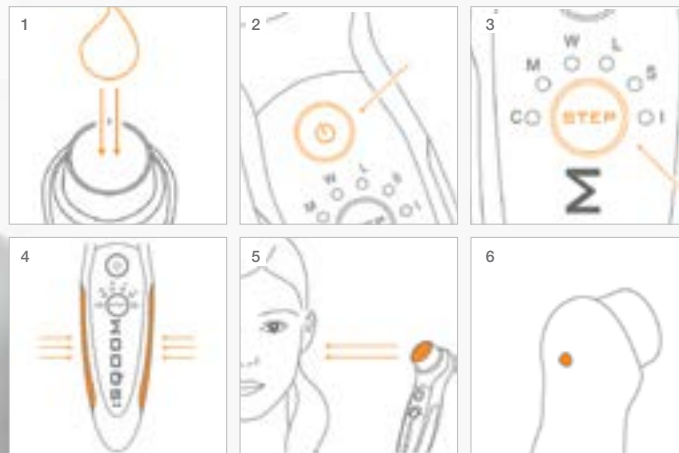

**xCential cleanser**

Благодаря xCential cleanser вы можете добиться самой оптимальной очистки кожи до самых глубоких пор. Гель воздействует на бактериальную флору и создаёт благоприятные условия для существования полезных для кожи микроорганизмов и таким образом подготавливает вашу кожу для следующих процедур с SQQOM. Гель, содержащий пантенол и экстракт ромашки, обладает успокаивающим эффектом.

xCential H+

Инновационный гель против старения содержащий полезные для кожи и натуральные действующие вещества. Основным компонентом геля является фрагментированная гиалуроновая кислота. Мелкие частицы гиалуроновой кислоты обеспечивают гораздо более легкое проникновение большего количества частичек в основные слои кожи, где они заполняют полости, возникновение которых обусловлено старением кожи. А теперь этот гель с новой активной формулой, которая защищает вашу кожу от свободных радикалов и обеспечивает интенсивной влагой благодаря алоэ вера.

xCential deSpot

Этот отбеливающий гель содержит уникальное сочетание активных ингредиентов сульфорафана и генистеина, помогает устранять пигментные дефекты кожи и уменьшает возрастные пятна.

xCential booster

Концентрированная влага в течение 24 часов. Непосредственный эффект для свежего и бархатистого ощущения. Придает коже более молодой, сияющий вид.

xCential aqua+

aqua+ является специальной, обогащенной водой для оптимального дополнения к xCential гелям. Её можно применять ко всем гелям, так как она защищает от преждевременного сушения.

- Очистите кожу, как обычно удалите косметику, крема и духи.
- Нанесите xCential cleanser гель на трансдучер или на обрабатываемый участок кожи.
- Включите прибор SQOOM, нажав на кнопку POWER и выберите программу **C** кнопкой STEP или программу **I** (синий) для области вокруг глаз.
- Крепко держите прибор SQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток.
- Затем приложите трансдучер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им медленными круговыми движениями.
- После завершения процедуры с использованием геля SQOOM cleanser следует протереть лицо влажной салфеткой или промыть водой.
- Результат: Кожа очищена до самых глубоких пор.



- Мы рекомендуем выполнять программу ОЧИСТКИ перед каждой процедурой.
- Нанесите гель xCential hyaGel на трансдучер или на обрабатываемый участок кожи.
- Включите прибор SQOOM, нажав на кнопку POWER и выберите **W** программу или программу **I** (зелёный) для области вокруг глаз, нажимая на кнопку STEP.
- Крепко держите прибор SQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток.
- Затем приложите трансдучер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им медленными круговыми движениями.
- Мы рекомендуем после завершения вечерней процедуры оставить гель в качестве маски, и позволить ценным ингредиентам благотворно воздействовать на надкожицу. После утренних и дневных процедур мы рекомендуем протереть лицо влажной салфеткой или протирать водой.
- Результат: Красивая и свежая кожа.



Совет: Используйте дополнительно к программе **W**, 1-2 раза в неделю программы **M** и **L**.

ПРОГРАММА 1 | C

Глубокая очистка кожи



ON

C



ПРОГРАММА 6 | I blau

Специально для области вокруг глаз



I



Время воздействия: 4 мин.

Применение: Один раз в неделю
Используйте ежедневно для более быстрых результатов.

ПРОГРАММА 3 | W

Снижение количества морщин, подтяжка кожи



ON

W



ПРОГРАММА 6 | I grün

Специально для области вокруг глаз



I



Время воздействия: 8-12 мин.

Применение: Один раз в неделю
Используйте ежедневно для более быстрых результатов.

- Мы рекомендуем выполнять программу ОЧИСТКИ перед каждой процедурой.
- Нанесите гель xCential deSpot на трансдюсер или на обрабатываемый участок кожи.
- Включите прибор SQQOOM, нажав на кнопку POWER и выберите W программу или программу I (зелёный) для области вокруг глаз, нажимая на кнопку STEP.
- Крепко держите прибор SQQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток.
- Затем приложите трансдюсер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им медленными круговыми движениями.
- Мы рекомендуем после завершения вечерней процедуры оставить гель в качестве маски, и позволить ценным ингредиентам благотворно воздействовать на надкожицу. После утренних и дневных процедур мы рекомендуем протирать лицо влажной салфеткой или промывать водой.
- Результат: Значительное уменьшение пигментных пятен.



- Нанесите гель xCential booster на трансдюсер или на обрабатываемый участок кожи.
- Включите прибор SQQOOM, нажав на кнопку POWER и выберите S программу, нажимая на кнопку STEP.
- Крепко держите прибор SQQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток.
- Затем приложите трансдюсер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им медленными круговыми движениями.
- После завершения процедуры, мы рекомендуем уже пальцами продолжать массировать оставшийся гель в кожу.
- Результат: Придает коже более молодой, сияющий вид.

Совет: Используйте xCential aqua+ до и во время процедур.




ПРОГРАММА 3 | W

Воздействие на пигментные аномалии (возрастные пятна)



ПРОГРАММА 6 | I grün

Специально для области вокруг глаз

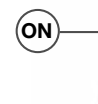

ПРОГРАММА 5 | S

Концентрированная влага в течении 24 часов.



Время воздействия: 8-12 мин.

Применение: Один раз в неделю
Используйте ежедневно для более быстрых результатов.



Время воздействия: 4 мин.

Применение: При необходимости - непосредственный эффект для особых случаев, или в качестве идеального дополнения xCential H + процедур.



acqua+ специально обогащенная вода для оптимального дополнения к xCentia гелям. Её можно применять ко всем xCentia гелям, так как она защищает от преждевременного сушения, снабжает питательными веществами и обеспечивает интенсивной влагой вашу кожу.

Распыляйте 2-4 нажатиями acqua+ спрея до или во время применения xCentia гелей непосредственно на обрабатываемые участки кожи.

С acqua+ вы получите „больше“ от ценных xCentia гелей.



**xCentialOL****Растяжения спины и мышц**

Мощный липосомальный экстракт босвеллии Сerratа расслабляет напряжение и уменьшает чувство дискомфорта.

xCentialAK**Загрязнённая, жирная кожа**

Природный салициловая кислота извлеченная из коры ивы, открывает заблокированные поры кожи. Клопогон влияет на производство кожного сала в сальных железах.

xCentialRO**Покрасневшая и чувствительная кожа**

Magnolol и ингредиенты зародышей каперсов успокаивают кожу.

xCentialPS**Сухая, шелушащаяся кожа**

Выдержки из липосомального активного ингредиента босвеллиевой кислоты, магнолола, активных ингредиентов липосомальной инкапсулированной лакрицы, экстракта календулы, декспантенола и чистого масла.

xCentialNA**Рубцы и растяжки**

Био-активные аминокислоты и натуральный экстракт Oporog-don Acanthium помогают коже восстанавливаться.

xCentialNE**Сухая, раздраженная кожа**

Магнолол, пантенол извлечённый из отростков каперсов и чистое масло камелии успокаивают кожу и оказывают увлажняющий эффект.

Просим Вас использовать SQOOM только с разработанными нами гелями по уходу за кожей. Мы не несем ответственности за результаты при использовании косметических или медицинских препаратов других производителей.

- Нанесите гель xCential OL на трансдучер или на обрабатываемый участок кожи.
- Включите прибор SQQOOM, нажав на кнопку POWER и выберите **M** программу, нажимая на кнопку STEP.
- Крепко держите прибор SQQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток.
- Затем приложите трансдучер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им слегка нажимая, медленными круговыми движениями.
- После завершения процедур OL, оставьте оставшийся гель на коже и массируйте его пальцами в кожу.



- Нанесите гель xCential RO на трансдучер или на обрабатываемый участок кожи.
- Включите прибор SQQOOM, нажав на кнопку POWER и выберите **M** программу, нажимая на кнопку STEP.
- Крепко держите прибор SQQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток.
- Затем приложите трансдучер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им слегка нажимая, медленными круговыми движениями.
- После завершения процедур RO, оставьте оставшийся гель на коже и массируйте его пальцами в кожу.



ПРОГРАММА 2 | M

При растяжении спины
и мышц



Время воздействия: 8-12 мин.

Применение: Ежедневно или по мере необходимости

ПРОГРАММА 2 | M

Для покрасневшей
типичной при розацеае и
чувствительной кожи



Время воздействия: Лицо 4-8 мин

Тело 12-16 мин.

Применение: 3 раза в неделю

- Нанесите гель xCential NA гель на трансдюсер или на обрабатываемый участок кожи.
- Включите прибор SQQOOM, нажав на кнопку POWER и выберите **M** программу, нажимая на кнопку STEP.
- Крепко держите прибор SQQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток.
- Затем приложите трансдюсер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им слегка нажимая, медленными круговыми движениями.
- После завершения процедур NA, оставьте оставшийся гель на коже и массируйте его пальцами в кожу.



ПРОГРАММА 2 | M

При рубцах и шрамах



Время воздействия: Лицо 4-8 мин.
Тело 12-16 мин.
Применение: Ежедневно или по мере необходимости

- Нанесите гель xCential AK гель на трансдюсер или на обрабатываемый участок кожи.
- Включите прибор SQQOOM, нажав на кнопку POWER и выберите **W** программу, нажимая на кнопку STEP.
- Крепко держите прибор SQQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток.
- Затем приложите трансдюсер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им слегка нажимая, медленными круговыми движениями.
- После завершения процедур AK, оставьте оставшийся гель на коже и массируйте его пальцами в кожу.



ПРОГРАММА 3 | W

При загрязнённой, жирной кожи



Время воздействия: Лицо 4-8 мин.
Тело 12-16 мин.
Применение: Ежедневно или по мере необходимости

- Нанесите гель xCential PS гель на трансдюсер или на обрабатываемый участок кожи.
- Включите прибор SQQOOM, нажав на кнопку POWER и выберите **M** программу, нажимая на кнопку STEP.
- Крепко держите прибор SQQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток.
- Затем приложите трансдюсер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им слегка нажимая, медленными круговыми движениями.
- После завершения процедур PS, оставьте оставшийся гель на коже и массируйте его пальцами в кожу.



ПРОГРАММА 2 | M

При сухой, шелушащейся кожи



Время воздействия: Лицо 4-8 мин.
Тело 12-16 мин.
Применение: Ежедневно или по мере необходимости

- Нанесите гель xCential NE гель на трансдюсер или на обрабатываемый участок кожи.
- Включите прибор SQQOOM, нажав на кнопку POWER и выберите **M** программу, нажимая на кнопку STEP.
- Крепко держите прибор SQQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток.
- Затем приложите трансдюсер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им слегка нажимая, медленными круговыми движениями.
- После завершения процедур NE, оставьте оставшийся гель на коже и массируйте его пальцами в кожу.



ПРОГРАММА 2 | M

При сухой, раздраженной кожи



Время воздействия: Лицо 4-8 мин.
Тело 12-16 мин.
Применение: Ежедневно или по мере необходимости

Просим Вас соблюдать следующие инструкции для обеспечения длительного срока службы Вашего прибора.

Просим Вас использовать SQOOM только с разработанными нами гелями по уходу за кожей. Мы не несем ответственности за результаты при использовании косметических или медицинских препаратов других производителей.



Международная гарантия

Гарантийный срок составляет два года. Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия в течение всего срока гарантии является его правильная эксплуатация, в соответствии с требованиями инструкций изготовителя.

При покупке зарегистрируйте ваш прибор:
www.sqoom.com/internationaleGarantie

Служба Обслуживание Тел.: +49 (0) 741 174 124 0

Пн - Пт с 8:00 до 18:00 часов

- Храните прибор в сухом месте и не мойте его водой.
 - Очищайте датчик влажности салфеткой.
 - Ставьте прибор в зарядное устройство после выключения и следите за тем, чтобы горел красный светодиодный индикатор.
 - Цвет светодиодного индикатора сменится с красного на зеленый при завершении процесса зарядки. В том случае, если при зарядке произойдет ошибка, красный светодиодный индикатор будет мигать.
 - Если батарея полностью разряжена, то необходимо заряжать ее как минимум 3 часа, прежде чем снова пользоваться прибором.
 - Полностью заряженный прибор будет работать примерно 4 часа. Нажмите на кнопку STEP и удерживайте ее примерно 3 секунды, чтобы увидеть уровень зарядки батареи. Если горит 6 светодиодных программных индикаторов, то прибор полностью заряжен.
- Если горит только 2 светодиодных программных индикатора,

- то зарядки батареи хватит на 30 минут работы. Звуковой сигнал указывает на то, что батарее необходимо подзарядить.
- Прибор автоматически отключится через 2 минуты, если не будет использоваться.
 - Стандартное время работы для каждой процедуры составляет 4 минуты. Тональный сигнал прозвучит через 4 минуты, и прибор переключится в режим ожидания. Прибор отключится окончательно, если Вы не возобновите его использование в течение 2 минут.
 - Номинальное входное напряжение составляет 100-240 В AC (переменный ток) – это значит, что Вы сможете пользоваться прибором во время путешествий в любой стране мира.
 - Отключите зарядное устройство от сети, как только прибор будет полностью заряжен.
 - Следите за тем, чтобы электрические контакты всегда были чистыми, незапыленными и сухими.

Технические характеристики и защита окружающей среды

Название прибора

Прибор SQOOM M2 (T-0204A)

Зарядное устройство

Линейное напряжение AC 100-240 В, 50/60 Гц

Вес 133 г

Ручной прибор

Литий-ионная батарея

Линейное напряжение AC 100-240 В

Выход/Адаптер 4.2 В = 1 А

Выход 7 Вт

Вес 194 г (общий вес)

Ультразвук

Частота от 1 МГц

Уровни интенсивности от 0,1 Вт/см² до 0,5 Вт/см²

Ионизация 1 Гц/150 мсек диапазон пульса

В интересах вторичной переработки прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором по окончании срока его службы. Вы можете вернуть прибор в Schick Medical GmbH или передать в соответствующие сборные пункты.

Важные примечания

Просим Вас использовать SQOOM только с разработанными нами гелями по уходу за кожей. Мы не несем ответственности за результаты при использовании косметических или медицинских препаратов других производителей.

Не воздействуйте на один и тот же участок кожи дольше 20 минут в день. Не используйте SQOOM на пораженных раком кожи или прооперированных участках.

Не используйте SQOOM при наличии кардиостимулятора.

При гиперфункции щитовидной железы не используйте SQOOM в передней области шеи или в области грудной клетки.

Не используйте SQOOM вблизи протезов суставов, поскольку это может вызвать боль.

Не используйте SQOOM в области живота или грудной клетки во время беременности.

Избегайте контакта с глазами. Храните прибор и гель в недоступном для детей месте.

Не храните гель при температуре выше +25°C.

Гель предназначен только для использования на коже.

Если Вы проводите процедуры с использованием прибора SQOOM на коже другого человека, то обязательно касайтесь этого человека свободной рукой (контакт с кожей), чтобы обеспечить правильное функционирование системы.

© Все права сохранены за компанией Schick Medical GmbH. На все информационные материалы распространяется авторское право.

Schick Medical GmbH,
D-78628 Rottweil



Зарегистрированный товарный знак
Schick Medical GmbH

Auf dem Wall 29
D-78628 Rottweil
Тел.: +49(0)741/174 124 0
Факс: +49(0)741/174 124 19
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com